

HMBI-G30 中草药DNA条形码 高通量基因测序一体机

中草药鉴定的通用型、高精度、一站式、高通量智能物种鉴定仪
可同时鉴定96个样本

**DNA条形码与DNBSEQ™ 技术的完美结合，
助力中草药鉴定**



应用场景

- 中草药基原鉴定
- 流通市场中草药鉴定
- 药品生产中草药鉴定
- 中草药育种选种



产品介绍

中草药DNA条形码高通量基因测序一体机（HMBI-G30）由序列测序系统、序列分析系统、数据库系统和信息管理系统4大系统组成，可广泛用于各种中草药的真伪鉴别。

产品特点

可靠的核心条形码序列

采用ITS2序列精确鉴定中草药物种，高效，简便，可实现多样本批量鉴定

全面的物种覆盖

涵盖2010版和2015版《中国药典》收录的绝大部分中草药及其常见混伪品，数据库物种超3万个

权威的中草药DNA条形码数据库

经国内外权威专家采用经典分类方法确定数据库基原序列，严格的校对机制确保条形码序列和基原样本高度一致

准确的序列测定


DNBSEQ™ 测序技术无测序错误累积，测序准确性高

一站式鉴定

通过HERB LIMS中草药实验室信息管理系统形成从样本录入到鉴定报告的本地化整体解决方案



工作流程

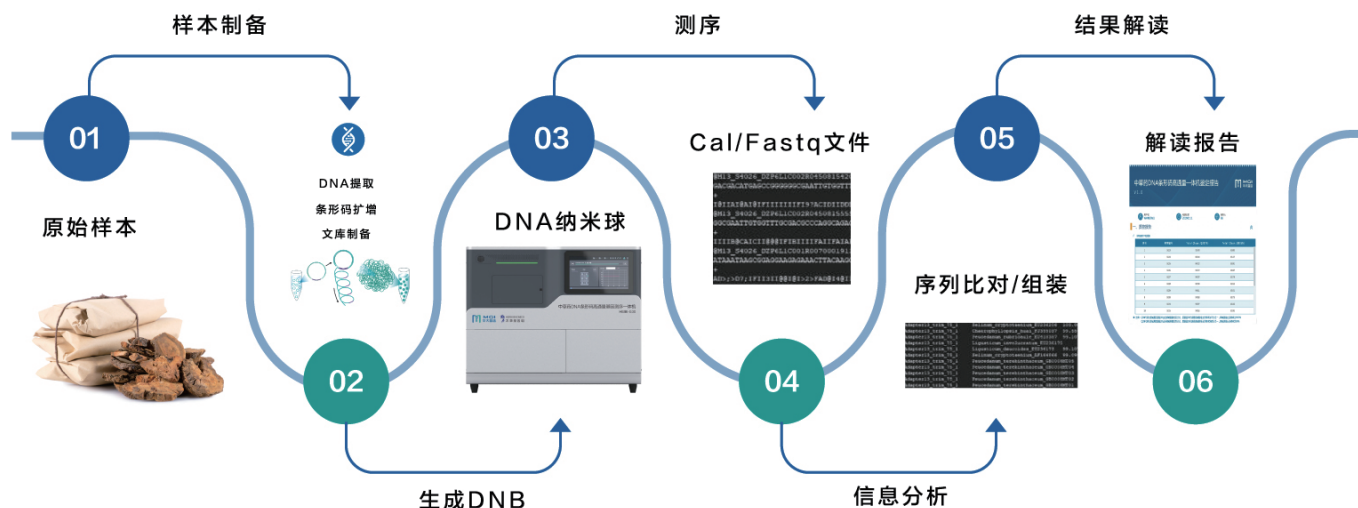

地址：深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼
网站：www.mgitech.cn
电话：4000-966-988
E-mail：MGI-service@genomics.cn

版权声明：本手册版权属于深圳华大智造科技股份有限公司所有，未经本公司书面许可，任何其他个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复制、拷贝、编辑或翻译为其他语言。本手册中所有商标或标识均属于深圳华大智造科技股份有限公司及其提供者所有。

版本：2020年7月版